





ケアメディックス

介護用品総合カタログ

VOL.8-1

- ケアスロープ[®]
- ケアスロープ[®]J
- ケアスロープ[®]JC
- ケアスロープ[®]T
- デクパック
- Bio-TC[®]シリーズ
- ケアカバー防水シートシリーズ
- ケアカバー消臭防水マット
- 使い捨て車いすシートカバー
- お風呂ピタットシート
- ライトスライド
- 高機能サポーターシリーズ

Caremedics

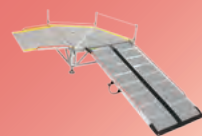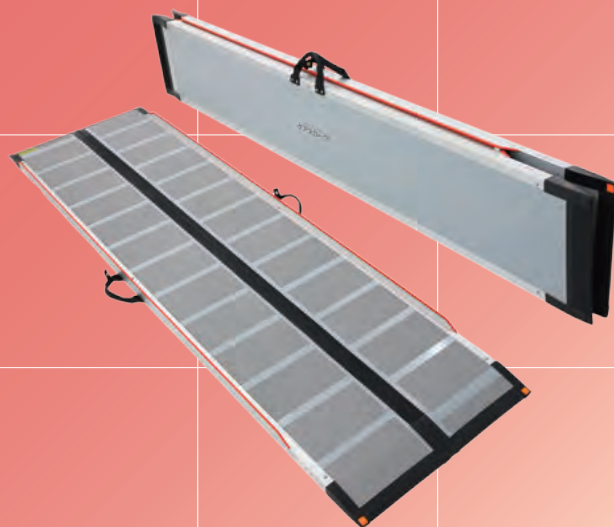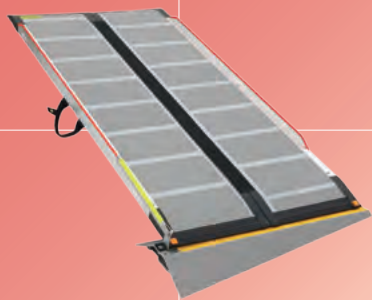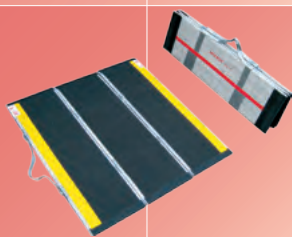

車いす用可搬形スロープ

介護保険レンタル対象品


安心と使いやすさにスマートさをプラス

ケアスロープ®

最大耐荷重
300kg

◆ 今まで入らなかった狭い間口に対応できる豊富なラインナップ！

《日本製》特許第5549894号 取得

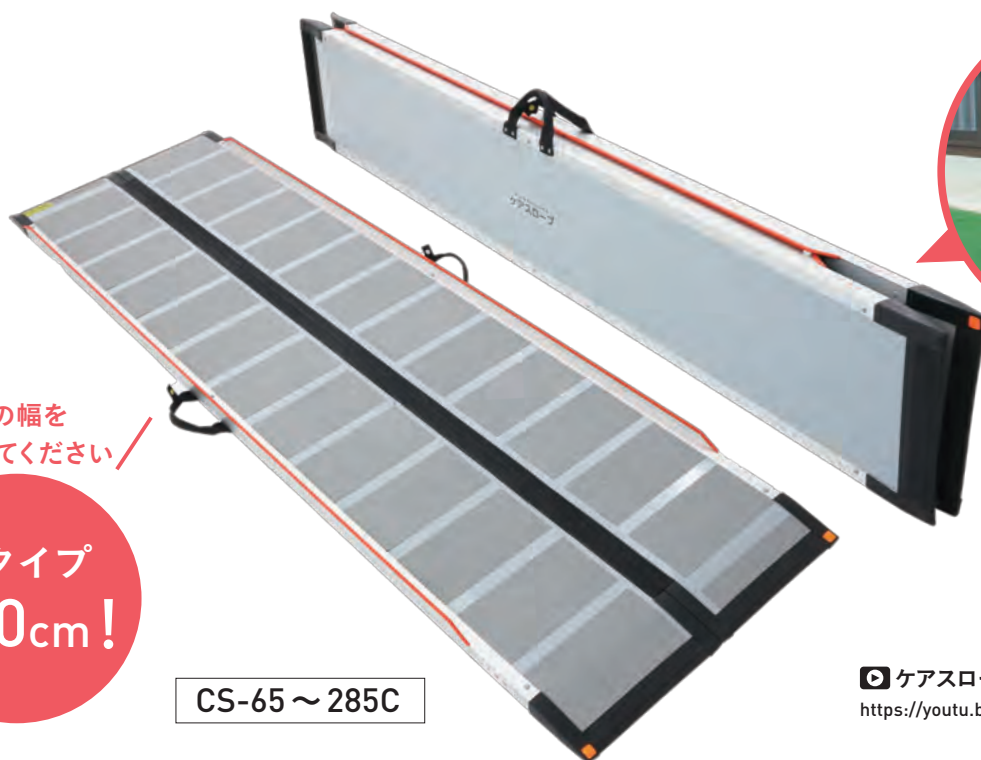

この幅を
活かしてください

全タイプ
幅70cm!

CS-65 ~ 285C

📺 ケアスロープ紹介動画
<https://youtu.be/UTt9hjDjRVw>



特長

● 狭い間口にも対応

幅を70cmにすることで、従来入らなかった狭い間口にも対応！



● 最小回転半径で 乗り入れ可能

下端部の脱輪防止エッジをカットすることで車いすのフットサポートがエッジに当たることなく、最小回転半径で乗り入れが可能です。



● メンテナンス性の向上

ご利用者、お取り扱い業者の目線に立ち、簡単・時短・低コストで自社メンテナンスができるようにしました。

※詳しくは4ページ参照

● 屋内でも使えるスロープ

走行面にやわらかい材質のすべり止めを採用。

CS-285C



3つのハンドバンドで取り回しが楽々！

ハンドバンドを3カ所に配置し、ひとりでも両手で持つことができ、取り回し易く、二人でも運搬・設置が可能です。



幅70cm、メンテナンス性の良さをそのままに、より高段差に対応できます。



使用方法



1 上端側を設置場所に置いてください



2 ハンドバンドのボタンを外してください



3 ハンドバンドを持ち、パネルを広げてください



4 パネルの設置面を上端側に表示している「設置ライン」までかけてください

ケアスロープ適応段差の目安表

注意 段差にあったスロープでも、道路にはみ出すと危険です。

使用状況	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差
※ 車いすの種類や介助する方の体力等により、適応範囲は変化します。この表は目安としてお使いください。 ※ 段差に対し最低でも6倍以上の長さのスロープをお使いください。	5°	8°	10°	15°
CSタイプ	介助者なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
CS-65	5cm	9cm	11cm	15cm
CS-100	8cm	13cm	17cm	24cm
CS-120	10cm	16cm	20cm	30cm
CS-150	13cm	20cm	25cm	37cm
CS-175	15cm	24cm	30cm	43cm
CS-200	17cm	27cm	34cm	50cm
CS-240C	20cm	33cm	41cm	60cm
CS-285C	24cm	39cm	49cm	73cm

☆全タイプJIS認証、貸与マーク取得済。

折りたたみ・自立



全タイプ折りたたんだ時に自立するので、無理な体勢からの持ち上げが不要です。

簡単なメンテナンス 簡単・時短・低コストで補修が可能です。



ケアスロープは、メンテナンスが簡単・時短・低コスト！


メンテナンス部材を各パーツ取揃えてありますので、お客様ご自身で補修することが可能です。

補修の方法はこちらをチェック！


📺 ケアスロープメンテナンス動画
<https://youtu.be/Ur-v7Bw7hl0>



ハンドバンドの交換は、ビス留め式。ドライバーで交換できます。

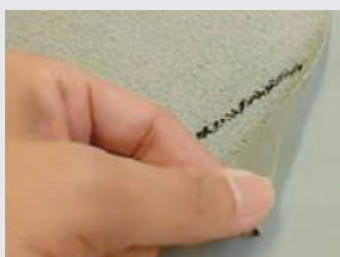

すべり止めテープは、部分貼り式なので交換が必要な箇所だけ取り換えができます。

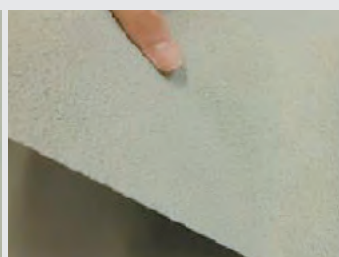

ケアスロープ価格表／規格表

タイプ	エッジの高さ	長さ×幅	重さ	標準小売価格+(税)	JANコード	TAISコード
CS-65	2.5cm	65cm×70cm	約3kg	¥67,000+(税)	4958519500008	00093-000015
CS-100	2.5cm	100cm×70cm	約5kg	¥83,000+(税)	4958519500015	00093-000016
CS-120	2.5cm	120cm×70cm	約6kg	¥107,000+(税)	4958519500022	00093-000017
CS-150	2.5cm	150cm×70cm	約8kg	¥118,000+(税)	4958519500039	00093-000018
CS-175	2.5cm	175cm×70cm	約9kg	¥125,000+(税)	4958519500046	00093-000019
CS-200	2.5cm	200cm×70cm	約10kg	¥136,000+(税)	4958519500053	00093-000020
CS-240C	2.5cm	240cm×70cm	約12kg	¥230,000+(税)	4958519500060	00093-000021
CS-285C	3.5cm	285cm×70cm	約15kg	¥290,000+(税)	4958519500077	00093-000038

☆材質:CS-65～CS-285C……繊維強化プラスチック・アルミ。☆上記サイズと重量は改良のため予告なしに変更することがあります。

☆折り畳み時の厚さ:CS-65～CS-120/8cm、CS-150～CS-240C/10cm、CS-285C/11cm。☆全タイプJIS認証、貸与マーク取得済。

車いす用可搬形スロープ


介護保険レンタル対象品

業界初!! 連結式長尺スロープ

ケアスロープ® J

最大耐荷重
300kg

- ◆ 分割できるため、軽ワンボックスカーで運搬ができます!
- ◆ 各パーツが軽量で女性でも持ち運びができます!
- ◆ 組み合わせにより80cmの段差も解消できます!
- ◆ CS-150 ~ CS-285Cを上端・下端どちらに組み合わせてもご利用いただけます!

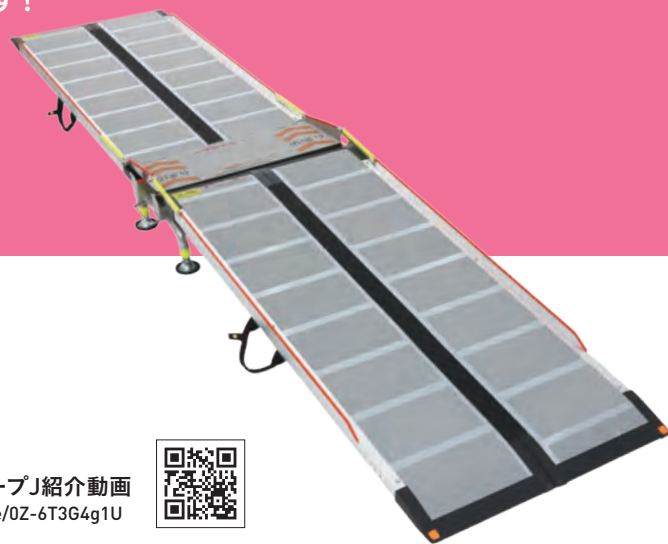

ケアスロープ J の介護保険請求について

- ① ジョイント台単体でのTAISコードの登録はありません
- ② 必ずケアスロープ2台とジョイント台の3点セットで1つのTAISコードをご記入ください

詳細は次ページのケアスロープ J 品番早見表をご参照ください


▶ ケアスロープ J 紹介動画
<https://youtu.be/0Z-6T3G4g1U>



ケアスロープ® J とは

ケアスロープ2台、ジョイント台1台を組み合わせた車いす用の長尺スロープです。


下端側ケアスロープ

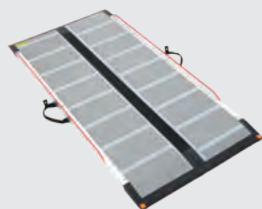

ジョイント台
(品番:CS-J)



上端側ケアスロープ

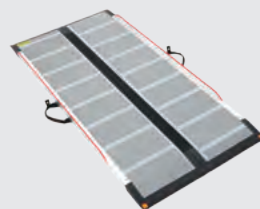

ケアスロープ® J




☆CS-150 ~ CS-285Cを上端・下端どちらに組み合わせてもご利用いただけます。

ケアスロープ J として
貸与マーク取得済み

ケアスロープ® J 専用 ジョイント台

ジョイント台にケアスロープをセットして、脱輪防止用のエッジアームをかけるだけの簡単設置!
特殊な工具は必要ありません。

《ジョイント台 (CS-J) 各部名称》

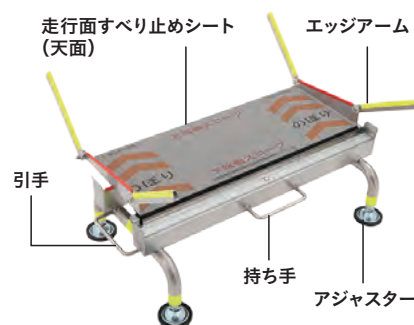

ジョイント台規格表

商品名	品番	幅×長さ×高さ	重量	最大耐荷重	材質	JANコード	標準小売価格 + (税)
ジョイント台	CS-J	幅78cm × 長さ42.5cm × 下端側スロープ受け 高さ 21cm ~ 26cm	約12kg	300kg	ステンレス スチール アルミ	4958519520006 ※TAISコードの 登録は ありません	¥83,000 + (税)

※ケアスロープ® J をご使用の際には必ず介助者が付き添ってください。

「ケアスロープJ」品番早見表

📺 ケアスロープJ使い方動画
https://youtu.be/qem-TCLF8Tk



使用スロープ

使用スロープ

	CS-150				
CS-150	CSJ-300 TAISコード 00093-000022	CS-175			
CS-175	CSJ-325 TAISコード 00093-000023	CSJ-350W TAISコード 00093-000044	CS-200		
CS-200	CSJ-350 TAISコード 00093-000024	CSJ-375 TAISコード 00093-000045	CSJ-400 TAISコード 00093-000048	CS-240C	
CS-240C	CSJ-390 TAISコード 00093-000025	CSJ-415 TAISコード 00093-000046	CSJ-440 TAISコード 00093-000049	CSJ-480 TAISコード 00093-000051	CS-285C
CS-285C	CSJ-435 TAISコード 00093-000043	CSJ-460 TAISコード 00093-000047	CSJ-485 TAISコード 00093-000050	CSJ-525 TAISコード 00093-000052	CSJ-570 TAISコード 00093-000053

ケアスロープJの 介護保険請求について

- ① ジョイント台単体でのTAISコードの登録はありません
- ② 必ずケアスロープ2台とジョイント台の3点セットで1つのTAISコードをご記入ください

*CS-150～CS-285Cまで、どのスロープを上端側・下端側に組み合わせても品番は変わりません。


*設置に必要な全長スペースは右記の長さが必要です。

上段スロープ長 + ジョイント台連結部の長さ13cm + 下段スロープ長 + 下段乗入れ時操作スペース

「上端側設置スロープ」段差目安表

上端側 CSタイプ	上端側適応段差目安表 (図①部分の段差目安)
CS-150	38cm(8°)～53cm(12°)
CS-175	41cm(8°)～58cm(12°)
CS-200	44cm(8°)～63cm(12°)
CS-240C	50cm(8°)～71cm(12°)
CS-285C	56cm(8°)～81cm(12°)

『ケアスロープJ』設置例

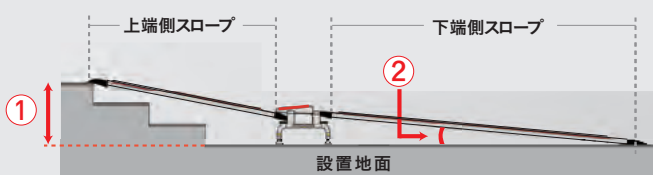


* ジョイント台と下端側スロープの設置地面がフラットである場合、
下端側に設置するスロープの長さが長いほど、②の傾斜角度が
緩やかになります。

【下端側適応段差目安】

CSタイプ…ジョイント台高さ(②の角度)

- CS-150 …… 21cm(8°)～26cm(10°)
- CS-175 …… 21cm(7°)～26cm(9°)
- CS-200 …… 21cm(6°)～26cm(8°)
- CS-240C …… 21cm(5°)～26cm(6°)
- CS-285C …… 21cm(4°)～26cm(5°)

このようなケースでも使えます

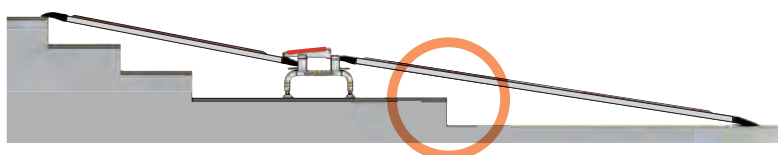

*階段の踊り場のような一段高い場所に設置することもできます。

下端側ケアスロープの設置

ジョイント台の高さは、下端側
スロープの設置受け部分(水平
器付き)を基準にしています。

ケアスロープ[®]J 設置例

ケアスロープJ(ジョイント台)を使用する事で、玄関ポーチにある多段差を解消できます！

Before



After



／ 様々な住宅環境に対応し、緩やかな傾斜を実現。介助者の負担軽減につながります！ ／



このような
問題を
解決します！

- ◆ 既存の可搬形スロープでは傾斜角度が急すぎる
- ◆ 昇降機が置けない
- ◆ 住宅改修ができない、したくない
- ◆ あがり框から外へ出る際、敷居によりスロープが掛けられない
- ◆ スロープの裏面に敷居があたってしまい安全に設置ができない


車いす用可搬形スロープ

介護保険レンタル対象品

特許出願中

ケアスロープ[®]JC

最大耐荷重
300kg

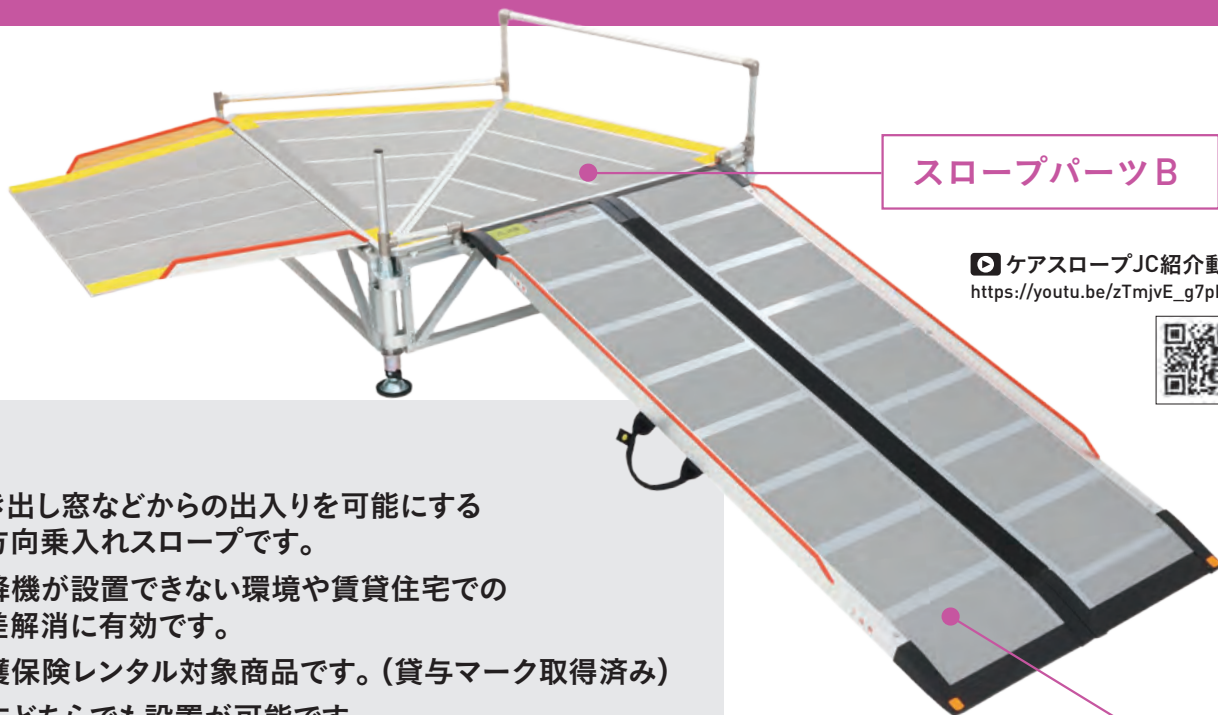

スロープパーツB

📺 ケアスロープJC紹介動画
https://youtu.be/zTmjvE_g7pl



特長

- ◆ 掃き出し窓などからの出入りを可能にする横方向乗入れスロープです。
- ◆ 昇降機が設置できない環境や賃貸住宅での段差解消に有効です。
- ◆ 介護保険レンタル対象商品です。(貸与マーク取得済み)
- ◆ 左右どちらでも設置が可能です。
- ◆ 運搬・取扱いがしやすくコンパクトに収納できます。
- ◆ 適応段差は30cm ~ 50cmです。
- ◆ 設置取り回しも簡単! 工具は不要です。
- ◆ 適応スロープ(スロープパーツA)はCS-150 ~ CS-285Cの中からご利用いただけます。
- ◆ 日本製です。

スロープパーツA

※ ケアスロープ[®]CS-150・CS-175・CS-200・CS-240C・CS-285Cをご利用ください。
これ以外のスロープでは介護保険レンタル対象となりません。


ケアスロープ[®]JC とは

スロープパーツA(ケアスロープ[®])とスロープパーツB(CS-JC)を組合せた

車いす用横方向乗入れスロープ です。

スロープパーツA
(ケアスロープ[®]: CS-150 ~ CS-285C)

スロープパーツB
(CS-JC)

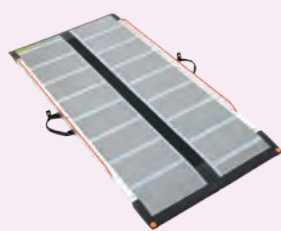

+



=

ケアスロープ[®]JC



※ケアスロープ[®]JCは一部仕様変更になる場合があります。

※ケアスロープ[®]JCをご使用の際には必ず介助者が付き添ってください。

I ケアスロープJC価格表／規格表

ケアスロープJC は、スロープパーツA及びBの組合せ製品となります。

品番	スロープパーツA	スロープパーツB	標準小売価格+(税)	TAISコード
CSJC-150	CS-150	CS-JC	¥348,000+(税)	00093-000054
CSJC-175	CS-175		¥355,000+(税)	00093-000055
CSJC-200	CS-200		¥366,000+(税)	00093-000056
CSJC-240	CS-240C		¥460,000+(税)	00093-000057
CSJC-285	CS-285C		¥520,000+(税)	00093-000058

品番	スロープパーツ	サイズ	重さ	材質	最大耐荷重	標準小売価格+(税)	JANコード
CS-JC ※スロープパーツBとしての単体型番	スロープパーツB ※スロープパーツBは各型番共通でのご利用となり、必ずスロープパーツAとの組合せとなります	天板 幅約107cm 奥行約107cm	約6.4kg	樹脂複合板	300kg	¥230,000+(税)	4958519540004 ※スロープパーツBでのTAISコードの登録はありません。必ずスロープパーツA(ケアスロープ®)と組合せての請求が必要です
		フレーム 幅約107cm 奥行約107cm 高さ(最低～最高) 54cm～74cm (落下防止柵含む)	約11.7kg (アジャスター、柵含む)	アルミスチール			
		フラップ 上端幅70cm 下端幅85cm 奥行57.5cm	約4.2kg	アルミ			

適応段差		
品番	高さ	傾斜角度
CSJC-150	30cm	12°
CSJC-175	30cm	10°
CSJC-200	35cm	10°
CSJC-240	40cm	10°
CSJC-285	50cm	10°

車いすの種類や介助する方の体力等により、適応範囲は変化します。
この表は目安としてください。

設置例

スロープをまっすぐに設置できない場所に最適です！



掃き出し窓や縁側から車いすの出入りができます！



左右方向問わず設置でき、ベランダやデッキにも使用できます！



車いす用可搬形スロープ

介護保険レンタル対象品


特許出願中

車いす用傾斜対応スロープ


勾配のある場所でもケアスロープ®を安定設置できます！

ケアスロープ®T


最大耐荷重
300kg

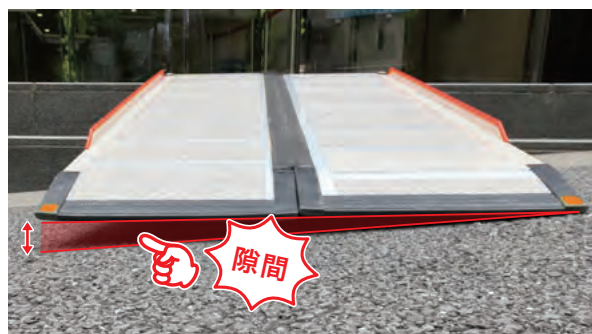


勾配のある場所にスロープを置くと
隙間が発生、設置が不安定...

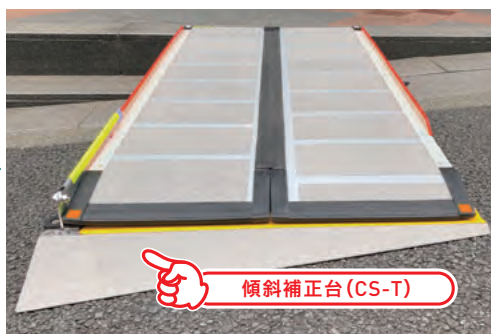

この隙間を補う事で
設置が安定します！

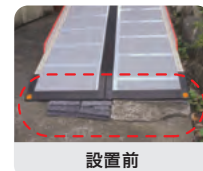

設置前

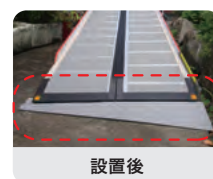

設置後

特長

- ◆ ケアスロープ®と地面の隙間に本製品を敷き、脱輪防止アームをセットするだけの**簡単設置！**
- ◆ 高さ調整ができ、**4cm～6cm**まで対応可能です！
- ◆ 本製品は脱輪防止アームを付け替える事で**左右どちらでも設置可能です！**

ケアスロープ®T 価格表


品番	TAISコード	傾斜補正台	対応スロープ	標準小売価格 【CS-T+スロープ】 + (税)
CST-120	00093-000065	CS-T	CS-120	¥155,000+ (税)
CST-150	00093-000059		CS-150	¥166,000+ (税)
CST-175	00093-000060		CS-175	¥173,000+ (税)
CST-200	00093-000061		CS-200	¥184,000+ (税)
CST-240	00093-000062		CS-240C	¥278,000+ (税)
CST-285	00093-000063		CS-285C	¥338,000+ (税)

※ケアスロープ®Tをご使用の際には必ず介助者が付き添ってください。

ケアスロープ®Tとは

ケアスロープ®と傾斜補正台 (CS-T) を組み合わせた
車いす用傾斜対応スロープです。

ケアスロープ®
CS-120～CS-285C

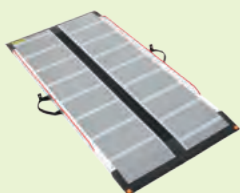

+

傾斜補正台
(CS-T)



=


ケアスロープ®T



※ケアスロープ®Tは一部仕様変更になる場合があります。

傾斜補正台 (CS-T) 規格表

製品名	ケアスロープ®T専用傾斜補正台		
品番	CS-T	サイズ	奥行 約29cm～30cm × 幅 約75cm
標準小売価格+ (税)	¥48,000+ (税)	高さ調整範囲	4cm～6cm
JANコード	4958519550003	対応傾斜 (勾配斜度)	3°～5°
重量	約3kg	材質	ステンレス・樹脂
耐荷重	300kg ※スロープにセットした状態	付属品	六角レンチ (4mm)

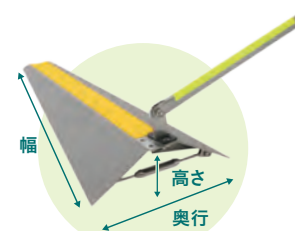


注) ケアスロープ®とセットでご使用ください。
CS-T単体でのTAISコードの登録はございません。



コンパクトに折りたたためて
種類が豊富なスタンダードスロープ


デクパック

最大耐荷重
300kg

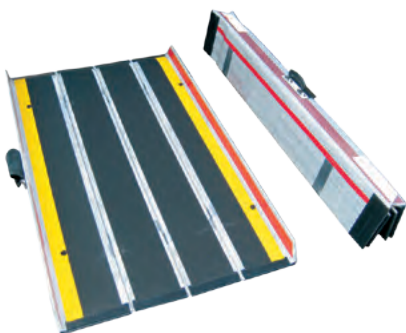


EBL (イービーエル)

- 幅広で両端には高さ約7cmの脱輪防止のエッジがついた最も安全性の高いタイプです。
- 安全性がより求められる公共施設や電動車いすをご利用の方に最適です。

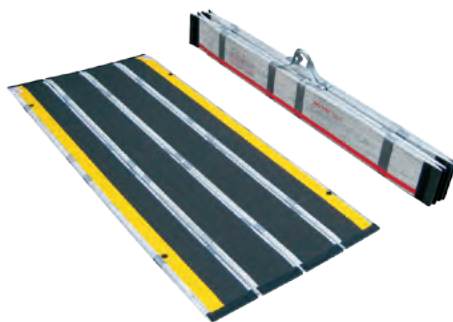


シニア

- 日本の家庭にマッチした四つ折りのスタンダード幅の長尺タイプです。
- 在宅だけでなく各種施設などで最も広くご利用されています。

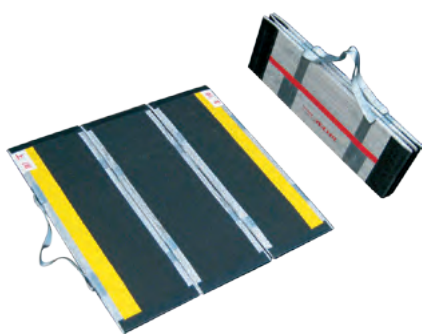

パーソナル

- 日本の家庭にマッチした三つ折りのスタンダード幅タイプです。

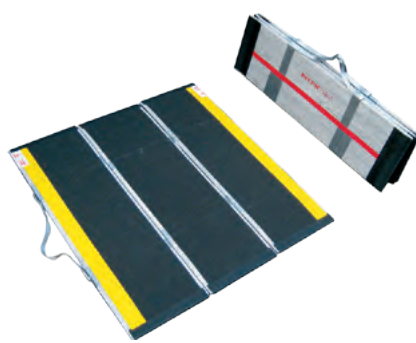

M.P. (エムピー)

- 幅にゆとりのある広幅三つ折りタイプですので安全性に優れています。

軽くて強い

- デクパックは全品種が耐久性に優れた繊維強化プラスチック(FRP製)の特殊複合構造です。極めて軽く、また使用中のたわみが少なく安心してご使用いただけます。

ゆとりの耐荷重

- 全品種とも耐荷重300kgですので、電動車いすや介助の方が一緒に乗っても安全です。

安心の滑り止め

- 表面には特殊なすべり止め加工が施されていますので雨の日でも安心してご使用いただけます。

独自の折りたたみ方式

- 幅方向に折りたためますので持ち運びが容易で簡単にセットできます。使用後は収納スペースをとらずに保管できます。

ズレ止めのラバーグリップ



- 上下端にはラバーグリップ(ズレ止め用ゴム材)が取り付けられていますので設置面をしっかりグリップします。

パーソナル・M.P.には車いすに取り付け可能なキャリングバッグをオプションでご用意しております。



設置方法

- ① 設置場所まではハンドバンドを持って運んでください。
- ② 「上端」と書かれている部分が段差の高い方へ、本体の黒いすべり止めの面が表になるように置きます。
- ③ 「上端」と書かれた側のラバーグリップが、少なくとも4cm以上設置面と接触するように位置を調節します。
- ④ 正しい位置に調節できたら、上になったハンドバンドのみを持ち、本体を持ち上げるようにして広げます。(シニアタイプのみ最後の1枚は手で広げます)
- ⑤ 最後に、ラバーグリップが設置面と十分に接し、本体が浮き上がったり外れていないかを確認します。

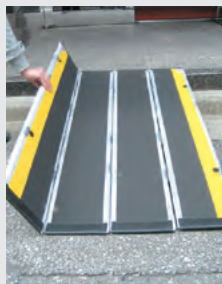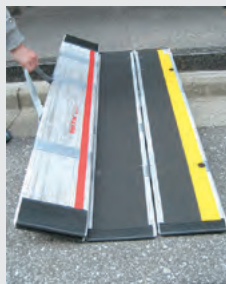


少なくとも4cm以上
設置面と接触するように
してください。

折りたたみ方法

- ① シニアタイプのみ最後の一枚を手で折りたたみ、ハンドバンドを露出させます。
- ② ハンドバンドを持ち、本体を持ち上げるようにして反対側から順に折りたたみます。
- ③ 二本のハンドバンドを持ち、移動させます。

デクパックが使用できる段差の目安

注意 段差にあったスロープでも、道路にはみ出すと危険です。

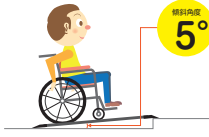使用状況		自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差	
※ 車いすの種類や介助する方の体力等により適応範囲は変化します。 この表は目安としてお使い下さい。 ※ 段差に対し最低でも6倍以上の長さのスロープをお使い下さい。						
タイプ	スロープ長	介助者なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界	
パーソナル	70cm	6cm	9cm	11cm	17cm	
M.P.	87.5cm	7cm	12cm	14cm	22cm	
EBL	シニア	90cm	8cm	12cm	15cm	22cm
		1.2m	10cm	16cm	20cm	30cm
		1.35m	11cm	18cm	23cm	34cm
		1.65m	14cm	22cm	28cm	42cm
シニア		1.85m	16cm	25cm	31cm	47cm
EBL	シニア	2.0m	17cm	27cm	34cm	50cm
		2.5m	21cm	34cm	43cm	64cm
		3.0m	26cm	41cm	51cm	77cm
		3.5m	30cm	48cm	60cm	90cm

デクパック価格表／規格表

タイプ	スロープ長	規格		標準小売価格 + (税)	JANコード	TAISコード 福祉用具届出コード ※記載に「Z」がついているものが 福祉用具届出コードです
		幅×長さ	重量			
パーソナル	70cm	73.5cm × 70cm	約4kg	¥ 90,000+ (税)	4958519411106	00093-Z00001
M.P.(エムピー)	87.5cm	84cm × 87.5cm	約5kg	¥ 112,000+ (税)	4958519412004	00093-000001
シニア	90cm	74cm × 90cm	約6kg	¥ 126,000+ (税)	4958519413605	00093-Z00002
	1.2m	74cm × 120cm	約7kg	¥ 138,000+ (税)	4958519413100	00093-Z00003
	1.35m	74cm × 135cm	約8kg	¥ 143,000+ (税)	4958519413209	00093-Z00004
	1.65m	74cm × 165cm	約10kg	¥ 184,000+ (税)	4958519413308	00093-Z00005
	1.85m	74cm × 185cm	約11kg	¥ 225,000+ (税)	4958519413506	00093-Z00006
	2.0m	74cm × 200cm	約12kg	¥ 243,000+ (税)	4958519413407	00093-Z00007
	2.5m	74cm × 250cm	約18kg	¥ 374,000+ (税)	4958519423505	00093-Z00008
	3.0m	74cm × 300cm	約22kg	¥ 482,000+ (税)	4958519423604	00093-Z00013
EBL (イービーエル) ◎脱輪防止用 エッジ付 内寸高さ 6～8cm	3.5m	74cm × 350cm	約29kg	¥ 659,000+ (税)	4958519423703	00093-Z00014
	90cm	81cm × 90cm	約7kg	¥ 133,000+ (税)	4958519414008	00093-Z00016
	1.2m	81cm × 120cm	約8kg	¥ 162,000+ (税)	4958519414107	00093-Z00017
	1.35m	81cm × 135cm	約10kg	¥ 170,000+ (税)	4958519414206	00093-Z00009
	1.65m	81cm × 165cm	約12kg	¥ 221,000+ (税)	4958519414305	00093-Z00015
	2.0m	81cm × 200cm	約14kg	¥ 289,000+ (税)	4958519414404	00093-Z00010
	2.5m	81cm × 250cm	約21kg	¥ 406,000+ (税)	4958519424502	-
	3.0m	81cm × 300cm	約25kg	¥ 561,000+ (税)	4958519424601	00093-Z00011
オプション品 キャリングバッグ (車いすに取り付け可能な携帯バッグ)	パーソナル用			¥ 6,600+ (税)	-	-
	M.P.用			¥ 7,000+ (税)	-	-

☆全品種最大耐荷重300kgです。

☆上記サイズと重量は改良のため予告なしに変更することがあります。

天然素材でスッキリ無臭化

バイオ・ティーシー

Bio-TC®シリーズ



NEW

Bio-TC®洗濯用洗剤 消臭MAX

〈洗濯用洗剤〉



5L

標準小売価格

¥5,000+(税)

箱サイズ:幅24.8cm × 奥行16.3cm
× 高さ29.5cm / 容量:5L

JANコード: 4958519800047



20kg

標準小売価格

¥18,500+(税)

箱サイズ:幅30cm × 奥行30cm
× 高さ28.8cm / 容量:20kg

JANコード: 4958519800054

特長

- ◆ 京都 北山杉の樹皮を原料とした消臭剤『Bio-TC®』を配合した、消臭効果のとても高い洗剤です。
- ◆ 中性タイプなので、お肌と繊維にやさしい洗濯洗剤です。
- ◆ 皮脂汚れなどのタンパク質汚れや繊維の奥の汚れも、バイオ酵素が浸透し分解・除去します。
- ◆ Bio-TC®が悪臭をキャッチして逃さないため、臭い戻りがありません。
- ◆ 香りでごまかすのではなく無臭化洗浄なので、福祉用具の洗浄に最適です。

【品名】洗濯用合成洗剤

【成分】界面活性剤[25%、高級アルコール系(非イオン)]、アルカリ剤、消臭剤、酵素

【用途】綿・麻・合成繊維用

【液性】中性 ※洗浄物を痛める成分(塩素・酸化剤など)は含んでおりません。また、蛍光増白剤を配合しておりません。

【使用量の目安】

水50Lに対し、50mL(汚れ、臭気の程度によって適宜調整)

用途

- ◆ マットレス、車いす用クッション、その他レンタルバック品の洗浄
- ◆ 臭いのこびり付いた布製品等の洗濯など

Bio-TC®

〈消臭剤〉



標準小売価格

¥28,000+(税)

箱サイズ:
幅29.5cm × 奥行29.5cm × 高さ27cm
容量:18ℓ

JANコード: 4958519800016

特長

- ◆ 製材所から生じる天然樹皮(京都・北山杉)を原料としたエコ消臭剤です。
- ◆ “人にやさしい”天然素材が主原料なので安全です。
- ◆ 様々な悪臭を吸着する事で、素早く消臭し、効果が持続します。

使用方法

Bio-TC®は無色無臭で安全な消臭剤ですので、消臭したい対象や程度に合わせた様々な使い方ができます。

- 福祉用具の消臭:臭気の軽いものはBio-TC®を表面に直接吹きかけ、布で清拭、もしくはそのまま乾燥させます。
- 室内の消臭:室内に直接Bio-TC®を噴霧します。
- 悪臭発生箇所(ゴミ集積場など)の消臭:臭いの発生箇所にBio-TC®を散布します。

※ Bio-TC®は、臭気の強弱に合わせ、適度な濃度に水で希釈し、お使いください。

幅広い用途に対応できる商品ラインナップ

ケアカバー防水シートシリーズ

NEW

ケアカバー防水シート マットレス用



特長

- ◆ 100cm×160cmの全面防水。大きめのサイズです。
- ◆ 抗菌防臭&高吸水繊維 **サピウム®**を表全面に使用。繊維上の細菌の増殖を抑えます。
- ◆ 表面はパイル地で肌触りが良く、汗や尿を吸収します。
- ◆ 裏面ポリウレタンフィルムがしっかり防水します。
- ◆ 洗濯ネットに入れて繰り返し洗濯ができます。
- ◆ 速乾性に優れています。

標準小売価格 **¥4,500+**(税)

サイズ: 100cm×160cm (全面防水)

カラー: グリーン・ピンク・ネイビー

素材: 表面…アクリル/基布…ポリエステル/裏面…ポリウレタン


JANコード: グリーン 4958519322037

ピンク 4958519322044

ネイビー 4958519322051

NEW

ケアカバー防水シート エアマット用

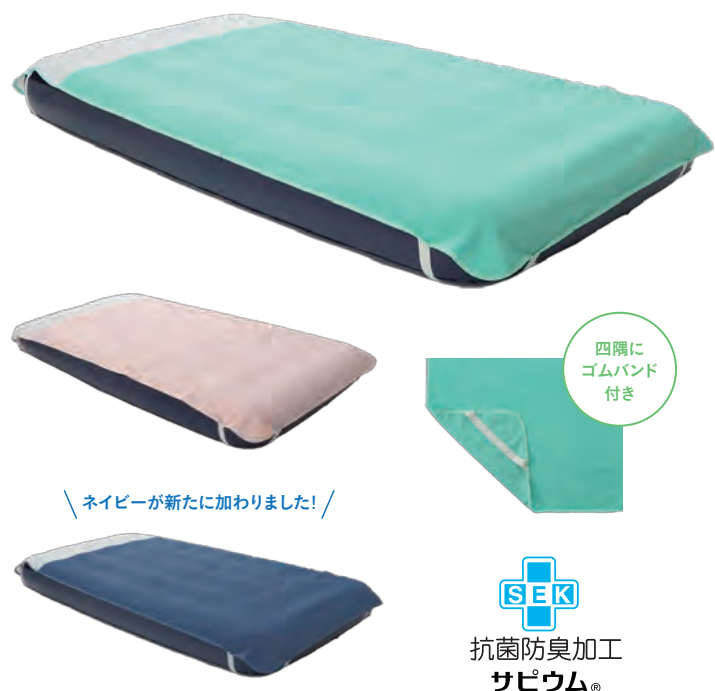

特長

- ◆ 四隅のゴムバンドにより、シートの取り付けが簡単です。
- ◆ 頭部側の白布部は撥水・防汚加工をしており、汚れを防ぎます。
- ◆ 抗菌防臭&高吸水繊維 **サピウム®**を白布部以外の表全面に使用。繊維上の細菌の増殖を抑えます。
- ◆ 表面はパイル地で肌触りが良く、汗や尿を吸収します。
- ◆ 裏面ポリウレタンフィルムがしっかり防水します。
- ◆ 洗濯ネットに入れて繰り返し洗濯ができます。
- ◆ 速乾性に優れています。

標準小売価格 **¥6,000+**(税)

サイズ: 100cm×200cm

カラー: グリーン・ピンク・ネイビー

素材: 表面…アクリル/基布…ポリエステル/

白布部…ポリエステル/裏面…ポリウレタン

JANコード: グリーン 4958519322068 / ピンク 4958519322075

ネイビー 4958519322082



NEW

ケアカバー防水シート 車いす用(2枚入り)

／ネイビーが新たに加まりました！／



車いすの押し手レバーにひもを結ぶだけの簡単セット



抗菌防臭加工
サピウム®



標準小売価格 **¥4,500+(税)**

サイズ:40cm×90cm(全面防水)

カラー:グリーン・ピンク・ネイビー

素材:表面…アクリル/基布…ポリエステル/

裏面…ポリウレタン

JANコード: グリーン 4958519322006

ピンク 4958519322013

ネイビー 4958519322020

1袋に
同色 2枚入り
1枚あたり
2,250円!

sapium®

サピウム®

抗菌防臭&高吸水繊維

サピウム® は、高い吸水性・水分移行性と速い乾燥性に特長がある吸水繊維です。

● 素早く吸水

水は細い孔に素早く吸収されるので、水滴はほとんど生じません。

● 素早く移動

多数の毛細管で、繊維内部に移動し、保水するので、繊維の膨潤はなくベトツキ感がほとんどありません。


● 素早く乾燥

多数の毛細管を通して繊維表面から発散されるので、アクリル繊維本来の乾き易さはほとんど変わりません。

● 抗菌防臭

繊維上の細菌の増殖を抑え、防臭効果があります。

※ サピウム®は東洋紡株式会社の登録商標です。確認番号 THC24065

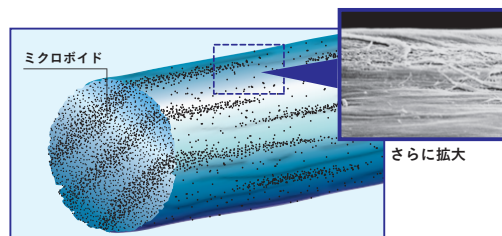

繊維内部に細かいマイクロボイドと、毛細管があり、表面の連続したマイクロボイドにつながっています。



抗菌防臭加工
サピウム®

SEK マーク (青)

抗菌防臭加工の試験をクリアした製品に付与される一般社団法人繊維評価技術協議会認証のマークです。

抗菌セラミックスが素早く臭いを吸着します！

ケアカバー消臭防水マット



特長

- ◆ 抗菌セラミックス表面に微細な孔が開いており、ニオイ成分を閉じ込めます。
- ◆ 表面は吸水性に優れています。
- ◆ 100cm×80cmの大きなサイズで、ポータブルトイレまわりの汚れを防ぎます。
- ◆ くり返し洗濯でき、速乾性に優れています。

標準小売価格 **¥4,300+**(税)

サイズ: 80cm×100cm

カラー: ベージュ・サックス

素材: 表面…ポリエステル / 裏面…ポリウレタン

JANコード: ベージュ 4958519321061

サックス 4958519321054

滑り止め加工を施した使い捨て防水シート

使い捨て 車いすシートカバー



特長

- ◆ 車いす座面の不意な失禁や食べこぼしなどによる汚れを防止します。
- ◆ 防水タイプのため車いすの汚染対策に最適です。
- ◆ 使い捨てのため、手間なく処理することができます。
- ◆ 清掃作業の軽減につながります。
- ◆ 製品に取り付け用の穴を設けており、車いすのハンドルに引っ掛けるだけで設置が完了。
- ◆ シート裏面には滑り止め加工を施しており、車いすへの着座時にズレにくくしています。

標準小売価格 **¥27,000+**(税)

サイズ: 45cm×100cm

カラー: サックスブルー

素材: 表面 / 裏面…レーヨン100%不織布 / ポリオレフィン系フィルム

入数: 100枚(20枚×5袋 / 1ケース)

JANコード: 4958519321092

安心で快適な生活のお手伝い

浴室すべり止めシート

ピタッと!

お風呂ピタットシート

- ◆ 足元にも、手でつかまる場所にも貼り付けできます。
- ◆ 使用する場所に合わせて、はさみで自由にカットできます。
- ◆ 表面の特殊すべり止め加工により、水に濡れても安全にご使用いただけます。
- ◆ 浴槽や洗い場に直接粘着固定できますので、使用中にシートがずれることなく安心です。
- ◆ ソフトな肌触りで赤ちゃんから高齢者まで快適にご使用いただけます。

浴室での
転倒事故
防止に!

お風呂でヒヤッとしたことは ありませんか?

浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。
「お風呂ピタットシート」は浴室での安全性を高
め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくための
すべり止めシートです。

1号


2号



すべりやすい浴槽内や浴槽の縁など
様々な場所に接着固定ができ安全です



排水しやすい方向で接着固定してください

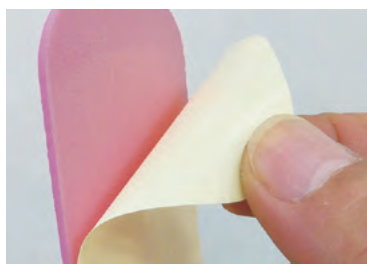

離形紙を剥がすだけの簡単接着固定です




はさみで自由に簡単にカットできます

貼り付け方法

注意: 細かいタイルや凹凸のある場所には接着できません。



1 貼り付け面の湯垢皮脂を
洗浄してください。メラミ
ンスポンジが効果的です。

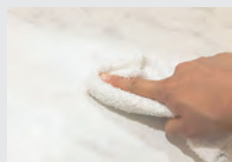

2 貼り付け面の水分をよく
拭き取ってください。



3 できればドライヤーの温
風で水分を乾燥してくだ
さい。



4 隙間なくよく圧着してください。
確実に粘着固定するために6
時間以上放置してください。

取り外すには

① シートの端からゆっくり
と剥がしてください。


② 粘着剤が残った場合は
ブラシなどで軽くこす
り取ってください。

種類	カラー	サイズ(幅×長さ×厚み)	入り数	標準小売価格+(税)	JANコード
1号	ブルー	5cm×20cm×2mm	12枚	¥3,400+(税)	4958519401305
	ピンク				4958519401312
	グリーン				4958519401367
	オレンジ				4958519401343
2号	ブルー	15cm×30cm×2mm	4枚	¥4,300+(税)	4958519401329
	ピンク				4958519401336
	グリーン				4958519401374
	オレンジ				4958519401350

簡単・安全・快適に看護者・介助者の腰痛を予防します

移乗補助具 ライトスライド

ライトスライドは、各種医療・介護施設でベッド・ストレッチャー・手術台・検査台などの間での患者移動にお使い頂く移乗補助具(スライディングボード)です。
簡単な作業でスムーズに移乗できますので、看護者・介助者の作業負担を大幅に軽減します！
安心の国内生産モデルです。

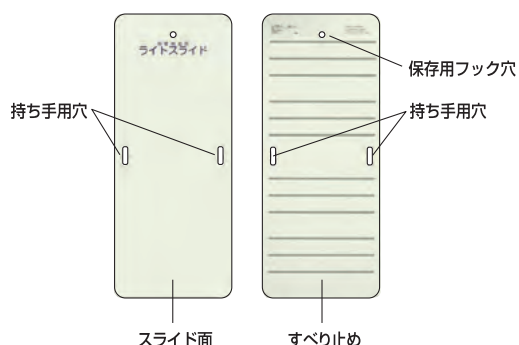

使用例

- ストレッチャー・入浴用ストレッチャー ↔ ベッド
- ストレッチャー ↔ 手術台・診察台
- ストレッチャー ↔ 各種検査台
- フルリクライニング車いす ↔ ベッド

構造と機能

- ポリカーボネイトとABS樹脂との複合材で丈夫で弾力性があり、10cm程度までの段差移動も可能です。
- 独自の2面構造で安定した移乗が可能です。
 - ・表面：円滑なスライド機能
 - ・裏面：すべり止め機能
- 両サイドに持ち運びに便利な持ち手用穴、上端部に収納に便利な保管用フック穴を設けております。
- 耐荷重は140kgです。

※洗浄消毒は中性洗剤と消毒用アルコール以外使用しないでください。
※X線、MRI、CT等の検査装置上では使用できません。

使用方法 ストレッチャー ↔ ベッドの場合



1 押し手側がシーツを持ち上げてください。受け手側はライトスライドを患者の下に挿入してください。



2 受け手側はシーツを引っ張り、押し手側は患者を押してライトスライドの上をスライドさせてください。



3 移乗完了後、持ち手用穴を握りライトスライドを抜き取ってください。

ライトスライド価格表／規格表

品名	品番	サイズ(幅×長さ)	厚み	重量	標準小売価格+(税)	JANコード	TAISコード
ライトスライドLサイズ	LS-L	63.5cm×152.5cm	0.4cm	4.9kg	¥40,000+(税)	4958519700002	00093-000039
ライトスライドMサイズ	LS-M	56cm×152.5cm		4.3kg	¥39,000+(税)	4958519700019	00093-000040
ライトスライドSサイズ	LS-S	48cm×140cm		3.4kg	¥38,000+(税)	4958519700026	00093-000041
ライトスライドハーフサイズ	LS-H	63.5cm×75cm		2.4kg	¥22,000+(税)	4958519700033	00093-000042

※カラーは全タイプアイボリーになります。

介護する人のために考えられたサポーターシリーズ

高機能サポーターシリーズ



足 ケアサポート ソックス



段階的
圧力設計

17hPa

20hPa

23hPa

特長

- ◆ 本体足元から血液を押し上げ、血液循環を促進し、疲れやむくみを和らげます。
- ◆ 綿混素材でムレにくく、天然抗菌剤「キトサン」によって、防臭します。
- ◆ 上端は脚を締め付けないリブ編み構造で、跡残りしません。



標準小売価格 **¥1,900+**(税)

カラー	サイズ	適応足サイズ	JANコード
ネイビー	S-M	22cm ~ 24cm	4958519603020
	M-L	24cm ~ 26cm	4958519603044
ホワイト	S-M	22cm ~ 24cm	4958519603051
	M-L	24cm ~ 26cm	4958519603068
ブラック	S-M	22cm ~ 24cm	4958519603013
	M-L	24cm ~ 26cm	4958519603037

膝 ケアサポート ニーI



特長

- ◆ 膝を外側から圧迫支持し、正常な歩行状態に近づけます。
- ◆ 重量わずか40g!装着していることを感じさせない軽さです。
- ◆ 長時間の装着でも快適な全面通気性素材を使用しました。

標準小売価格 **¥3,500+**(税)

サイズ	適応膝(ひざ)周囲	JANコード
S 右	30cm ~ 34cm	4958519602016
左	30cm ~ 34cm	4958519602054
M 右	34cm ~ 38cm	4958519602023
左	34cm ~ 38cm	4958519602061
L 右	38cm ~ 42cm	4958519602030
左	38cm ~ 42cm	4958519602078
LL 右	42cm ~ 46cm	4958519602047
左	42cm ~ 46cm	4958519602085

ケアウォーム

身体を温めることは 健康への第一歩です

身体が冷えると新陳代謝が低下し、血行が悪くなり免疫力も下がるといわれています。またコリや痛み、関節の動きも制限されて負担が増加します。健やかな生活のためにも身体を温めることから始めましょう。

特長

- ◆ 保温性の高いウールと高性能アクリル繊維を組み合わせました。
- ◆ 肌側にパイル層を設け保温性を高めました。(手のひら用を除く全種)
- ◆ 天然抗菌剤「キトサン」を使用し、抗菌防臭効果だけでなく肌への優しさも実現しました。
- ◆ 装着方向がわかる「ブルーライン」を入れたユニバーサルデザインです。



肩用 四十肩・五十肩

- 肩の筋肉を幅広く保護します。
- 左右兼用です。



肘用 テニス肘

- 肌側全面パイルです。



手のひら用 腱鞘炎

- 親指を独立して保護します。



膝用

変形性膝関節症

- 歩行しやすいように膝の後ろは薄くしました。
- 脚にフィットして使用中のズレを防ぐ立体デザインです。



足首用

捻挫

- ズレにくいかとオープンタイプです。
- 肌側全面パイルです。

種類	サイズ	入り数	カラー	標準小売価格+(税)	JANコード
肩用	フリー サイズ	1枚/袋	ホワイト	¥2,800+(税)	4958519601019
肘用		2枚/袋		¥1,800+(税)	4958519601026
手のひら用		2枚/袋		¥1,600+(税)	4958519601033
膝用		2枚/袋		¥2,000+(税)	4958519601040
足首用		2枚/袋		¥2,000+(税)	4958519601057



ケアメディックス株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 3-23-1 SKビル 2 階

TEL.03-3837-0551 FAX.03-3837-0554



[WEBはコチラ]

<http://www.caremed.co.jp/>

※製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

※カラー印刷インクや撮影条件などから
実際の色と多少異なる場合があります。